
Brugervejledning

Heidi

Talende køkkenvægt

Import:

HJÆLPEMIDLER FOR HANDICAPPEDER A/S

Grøndalsvej 8, Ulbjerg, 8832 Skals

Tlf. 9895 4244 – hfh@synsnerven.dk

www.synsnerven.dk



HJÆLPEMIDLER
FOR HANDICAPPEDER

Indholdsfortegnelse

1. Introduktion
2. Beskrivelse og levering af apparatet
3. Strømforbindelse
4. Igangsætning og tastaturbeskrivelse
 - 4.1 Tænd / Sluk
 - 4.2 Vejning
 - 4.3 Tara Vægt Funktion
 - 4.4 Lydstyrke
 - 4.5 Tastaturlås
 - 4.6 Gentag
 - 4.7 Rerefence måling
 - 4.8 Tilsætte vægt
 - 4.9 Indstillinger
5. Sikkerheds instruktioner
6. Vedligeholdelse
7. Tekniske Data
8. Garanti og service
9. Legal notits vedrørende bortskaffelse af affald
 - 9.1 Bortskaffelse af brugte elektroniske apparater
 - 9.2 Batteri genbrug
10. Brugte symboler

På vegne af de konsoliderede firmaer CareTec og Marland, takker vi Dem for at have købt dette produkt. De vil kunne finde mere information vedrørende vores firmaer på de sidste sider af manualen.



VIGTIGT: Brug ikke dette apparat uden at have læst og forstået brugervejledningen først. Behold vejledningen for yderligere henvisning og behold den sammen med apparatet.



VIGTIGT: En returnering af dette apparat er kun muligt indenfor prøveperioden, og at den fremstår komplet samt ren og i original emballage. Der vil blive afkrævet et beløb for et ukomplet apparat, samt fra manglende dele og der vil blive afkrævet hvis en rensning af produktet og dets komponenter er nødvendigt.



VIGTIGT: Overskrid aldrig maximum vægten som lyder på 5 kg!

1. INTRODUKTION

HEIDI- er et brugervenligt og smukt designet talende køkkenvægt lavet af CareTec! Apparatet inkluderer alle standard veje-funktioner. Ud over dette tilbyder HEIDI også muligheden at veje et forudbestemt ønsket vægt. De vil blive imponeret over produktets nøjagtighed og diversitet. At addere vægt til et forudbestemt vægt-mål er ligeså nemt som de mange andre applikationer. HEIDI's vejeplade er på omkring de 180 kvadrat centimeter og tilbyder derfor nok plads til ordentligt at kunne stille tallerkner af forskellig størrelse på den.

2. BESKRIVELSE OG LEVERING AF APPARATET

Levering af apparatet inkluderer et batterisæt (4 x 1.5 V AAA) samt et udprintet brugervejledning. Udover dette kan der bestilles en tilhørende strømforsyning.

Sæt HEIDI på dets 6 gummifødder, således at den mere skrånede del med de tydelige knapper på vender mod Dem.



Forsiden: De opererende bestanddele og displayet skal være vendt mod Dem. De kan nu mærke de følgende knapper: ved venstre hjørne er der en rund knap med et føleligt punkt. Dette er tænd/sluk knappen. Til højre for tænd/sluk knappen, er der ovale knapper: brug den venstre knap til at skrue ned for lydstyrken, og den højre knap bruges til at skrue op for lydstyrken. Ved at trykke på de to knapper samtidigt, kan De enten aktivere eller deaktivere tastaturlåsen. På højre side af køkkenvægten er der arrangeret vertikalt tre aflange knapper. Fra øverst til nederst, vil vi referere til disse knapper som knap 1 (den nederste), knap 2 (midterknap), og knap 3 (øverst). Brug knap 1 til at gentage vægtresultaterne, knap 2 bruges til at operere reference måling funktionen og knap 3 til at addere vægt. Lige bagved de opererende bestanddele finder De vejepladen. Det er her De sætter de sager De ønsker at veje.

Venstre Side: på venstre side af apparatet findes der tre kontakter. Den der er Dem nærmest er et høretelefon stik (høretelefoner kan købes), kontakten i midten er en service forbinder til vores teknikere og kontakten længst fra Dem, er et stik til en strømforsyner (som kan købes).

Bunden: på bunden af apparatet kan De mærke 6 gummi fødder, som forhindrer i at apparatet ikke glider. Lige nedenunder området med de opererende bestanddele- som er nærmest Dem- kan De mærke det rektangulære låg, såvel som højtaleren.

3. STRØMFORSYNING

HEIDI kan operere på batterier ligeså med en strømforsyner enhed. Et passende strømforsyning er valgfrit og skal bestilles separat.

Batterier: for at få adgang til batterikamret på bunden af apparatet, træk klinken på låget i retningen mod højtalerristen samt løft låget på samme tid. Låget kan ikke fjernes helt. Indsæt batterierne med den rigtige polaritet: den flade negative side på batteriet skal vende mod den mærkbare fjeder der er i batterikamret. Når batterierne er blevet korrekt indsat, vil De høre en lille melodi som bekræftning. Derfter luk skånsomt batterilågen indtil De hører at den klikker på plads.



VIGTIGT: Skift batterier så snart De hører HEIDI annoncere „batteriet et tomt“ !

Brug af strømforsyner: HEIDI kan også benyttes med en ekstern strømforsyner (valgfrit). Forbind strømforsyneren til kontakten der befinder sig på venstre side af apparatet ved siden af vejepladen. Batterierne kan forblive inde i apparatet mens De bruger HEIDI med strømforsyneren.

4. IGANGSÆTNING OG TASTATURBESKRIVELSE

For at tænde for apparatet, tryk på tænd/sluk knappen (rund knap på venstre side ved hjørnet). De vil høre annonceringen : ”parat”. For at slukke for apparatet, tryk og hold nede tænd/sluk knappen indtil De hører en lille melodi der bekræfter slukningen af apparatet.

4.2 Vejning

Placér veje eksemplet på midten af vejepladen. Når værdien ikke længere ændrer sig, vises vægten på det store display og annonceres i en klar og naturlig stemme.

4.3 Tara vægt funktion

De kan sætte vægten til nul på ethvert tidspunkt under veje processen. For at gøre det skal De trykke på tænd/sluk knappen efter at vejningen er blevet annonceret. HEIDI vil sige: ”tara” og den viste værdi på displayet vil blive sat til nul. Vægten er nu klar til en ny veje process. Tara vægt funktionen er meget brugbar hvis De foretrækker at veje ting i en beholder. De kan sætte tallerknen på vejepladen, sætte værdien til nul og derefter starte at lægge vægt på som ønsket. De kan gentage denne process til en kapacitet af max 5 kilo.

4.4 Lyd

Brug plus og minus knappen for at sætte lyden. Disse to rektangulære knapper befinder sig lige ved siden af tænd/sluk knappen. Brug den venstre knap til at formindske og den højre knap til at forhøje lyden af tale effekten. HEIDI tilbyder 6 lyd niveauer og vil annoncere den nuværende lyd niveau.

4.5 Tastaturlås

For at aktivere tastaturlåsen tryk og hold nede simultant de to lyd niveau knapper. De vil herefter høre ” tastaturlås til”. Hvis De trykker på en knap mens tastaturlåsen er til, vil HEIDI informere Dem ved at sige ” tastaturlås til”. For at åbne tastaturlåsen, tryk og hold nede simultant igen de to lyd niveau knapper indtil De hører ” tastaturlås af”.



VIGTIGT: Tastaturlåsen deaktiveres ved at afbryde for strømforsyningen

4.6 Gentag

Hvis De ønsker at høre det sidste resultat igen, skal De trykke på knap 1 (nederste knap på højre side af apparatet)

4.7 Reference måling

Denne funktion tillader Dem at derterminere en såkaldt mål vægt før målingen. Hvis De starter med veje processen efter at have sat en mål vægt, vil HEIDI indikere via akustiske signaler om enten veje eksemplaret er nær ved eller har overskredet Deres ønskede reference værdi.

4.7.1 Indsætning af en mål vægt (”ønskede vægt”)

Tryk på knap 2 (midter knappen på højre side af overfladen). De vil høre ” pålæg ønskede vægt”. Placér den ønskede vægt på veje pladen. HEIDI vil annoncere vægten og De kan nu gemme det som Deres mål vægt ved at igen trykke på knap 2.

4.7.2 Reference måling

Efter at have sat en mål vægt, tryk igen på knap 2 og De vil høre ” indsæt ønskede vægt”. Begynd med at lægge vægt på. De vil høre en tone imens. Jo tættere De er på mål-vægten (Deres ønskede vægt), jo højere og hurtigere bliver tone intervallerne. Når De overgår den ønskede vægt, bliver tonen lavere igen. Et kontinuerligt bip, indikerer at den ønskede vægt er blevet opnået. Tryk igen på knap 2 for at forlade reference måling.

VIGTIGT: Venligst læg mærke til opfyldnings kapaciteten når De opnår Deres ønskede vægt.

4.8 Tilsætte vægt

HEIDI tillader Dem at tilsætte vægt og genkalde både værdi tilsat såvel som den totale vægt (værdi gemt). Læg et vægt-eksemplar på pladen og tryk på knap 3 (øverste højre knap) efter at vægten er blevet annonceret. Den anvendte vægt vil derefter blive gemt. Når der tildeles vægt vil HEIDI ikke kun alene annoncere værdien af den vægt der bliver pålagt, men vil også indikere den totale gemte vægt. Når De har fjernet alt fra vægten vil den sidste gemte værdi blive annonceret. For at tildele mere vægt end kun én gang, gentag den forgangne process. For at slette den gemte værdi, tryk og hold nede knap 3.

4.9 Indstillinger

For at skifte mellem veje enhederne, tryk og hold nede simultant knap 1 og knap 3.

5. Sikkerheds instruktioner

- Udsæt ikke apparatet for store mængder fugt, ekstreme høje eller lave temperaturer eller nogen form for støv eller snavs. For at apparatet kan fungere korrekt skal temperaturen være mellem +5 og +30°C. Hvis der skulle komme nogen form for væske ind i apparatet, tag da batterierne ud, dup apparatet af med en klud, og lad apparatet tørre fuldstændigt.
- Placer apparatet på et horisontalt, stabilt og tør overflade, såsom et køkkenbord.
- Hvis De ikke bruger apparatet i længere tid, venligst fjern batterierne, for at undgå lækage.
- Når De sætter batterierne i, venligst læg mærke til den korrekte polaritet.
- Denne køkkenvægt er designet til at støtte en vægt på maximum 5 kg. Gå aldrig over denne grænse!
- Når køkkenvægten ikke er i brug, sæt da ikke andre objekter på veje pladen
- Funktionalitet og veje nøjagtighed kan godt blive forringet pga magnetiske felder (f.eks ved at bruge en mobiltelefon i nærheden af apparatet).

6. Vedligeholdelse

Brug en let fugtet klud til at rengøre apparatet.



ADVARSEL: ingen form for væske må komme ind i apparatet! Undgå syrer eller enhver form for skure rensere, og rengør ikke overfladen med grove svampe, da det kan beskadige apparatets skrin.

7. Tekniske Data

| | |
|--------------------------|--|
| Dimensioner: | l/b/h: 220x145x(25.5-26.8)mm |
| Vægt: | 588g 636g (inkl. Batterier) |
| Strømforbindelse: | 4 x 1.5V AAA Mikro batterier 1 strømforbinder enhed (ikke inkluderet I leveringen) |
| Ved levering: | Talende køkkenvægt HEIDI, 4 x 1.5V AAA Mikro batterier, udprintet brugervejledning Valgfrit: strømforbinder, høretelefoner |
| Garanti: | 2 år |

8. Garanti og Service

Fra dagen af indkøbet af apparatet, udgiver vi til køberen af apparatet en garanti der lyder på:

Fireogtyve (24) måneder på selve apparatet

Tolv (12) måneder på tilbehør (f.eks. strømforbinder, høretelefoner etc.)

Seks (6) måneder på sliddelene (f.eks batteri, skrinet etc)

ADVARSEL: Venligst notér at vi ikke udgiver nogen form for garanti på eksterne hukommelse medier (CD'er,



I løbet af denne garantiperiode nævnt ovenover, vil produktet enten blive repareret eller erstattet gratis. Under ingen omstændigheder vil CareTec være forpligtet overfor indirekte, specielle eller deraf følgende skader. Apparatets udsættelse for væsker, stærke elektromagnetiske felter, varme såvel som tab af apparatet eller åbning af skrinet medfølger en øjeblikkelig tab af garanti. Hvis der skulle opstå problemer, venligst kontakt CareTec eller Deres lokale distributør, før De sender apparatet tilbage uden nogen yderligere grund. Vi vil derefter informere Dem om de nødvendige procedurer. Apparatet må kun åbnes af autoriserede teknikere!

CareTec beholder rettigheden til ændringer eller forbedringer til produkter uden yderligere varsel.

9. Legal notits vedrørende bortskaffelse af affald

9.1 Bortskaffelse af elektronikse apparater

Dette produkt skal afskaffes separat fra almindelig husholds affald, på steder såsom genbrugs- eller giftaffalds lossepladser. For yderligere information, venligst kontakt Deres lokale myndighed.

9.2 Genanvendelige batterier

Batterier må ikke smides ud med almindelig husholds affald. Som forbruger er De legalt forpligtet til at bringe Deres brugte batterier til offentlige genbrugs eller giftaffalds foreninger (i Deres lokalområde eller enhver butik som handler med disse batterier).

Pb-Cd-Hg

Disse tegn kan findes på forurenings ladet batterier:

Pb: indeholder bly / Cd: indeholder cadmium / Hg:
indeholder kviksølv

13.10. SYMBOLER I BRUG



Læs manualen




Skal bortskaffes separat fra normal affald



Producent: CARETEC GMBH, Stubenbastei 1, A 1010 Wien



Serie nummer

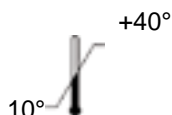

Temperatur begrænsninger fra: 10° til 40° Celsius



Advarsel

Producent:

CareTec GmbH, Stubenbastei 1, A 1010 Wien, Østrig er producent
for dette produkt: (+43 1) 513 80 81-9, E-mail: office@caretec.at;
web: www.caretec.at